



People.Health.Care.

# Cellacare® Malleo Control Comfort

Orthese voor de acute behandeling van het enkelgewricht.

NIEUW


COMFORT



Cellacare Malleo Control Comfort is een in het frontale vlak stabiliserende enkelorthese voor het behandelen van enkeldistorsies. De orthese bestaat uit twee rigide schelpen die verbonden worden door een hielkussen. De enkel wordt gestabiliseerd omdat deze door de orthese zowel aan de mediale als laterale kant omsloten wordt (U-brace-effect).

- zacht kussen voor de malleolus
- schelpen met soepele gedeelten voor een goede pasvorm
- product verkrijgbaar in 2 maten



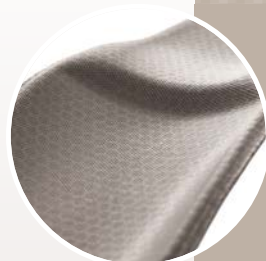

### Bewezen werkingsprincipe

- maakt dorsaalflexie en plantairflexie mogelijk, en biedt ondersteuning tegen bovenmatige inversie van de enkel
- beperkt bovenmatige bewegingen in inversie/eversie-richting door externe stabilisatie met mediale en laterale braces
- de afwikkelbeweging wordt niet in belangrijke mate belemmerd


### Eenvoudige hantering

- aanbrenginstructies op het product ondersteunen de juiste toepassing
- met drie banden voor snelle en eenvoudige bevestiging
- met hielband die tijdens het dragen van de orthese versteld kan worden

### Comfortabel te dragen

- versies voor links of rechts voor een betere pasvorm die is aangepast aan de anatomische vorm van de enkel
- zacht, comfortabel kussenmateriaal
- bovenste gedeelte van het kussen is dunner voor aanpassing aan het onderbeen

Lichaamslengte

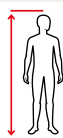

## Cellacare® Malleo Control Comfort

Orthese voor de acute behandeling van het enkelgewricht

Maat	Lichaamslengte (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
<b>Versie voor de rechterkant</b>				
1	< 160	129 911	16 828 755	1 / 26
2	> 160	129 912	16 828 763	1 / 26
<b>Versie voor de linkerkant</b>				
1	< 160	129 913	16 828 771	1 / 26
2	> 160	129 914	16 828 798	1 / 26



### Indicaties

- bandletsels boven aan het enkelgewricht (graad 1-2)
- actieve artrose, artritis
- chronische bandinstabiliteit
- perimalleolaire zwelling, gewrichtsoedeem, intra-articulaire overprikkeling

### Kleur

taupe/wit