

Suprasorb[®] X + PHMB

Antimicrobieel HydroBalance-wondverband



Suprasorb X + PHMB werkt antimicrobieel tegen een breed spectrum van ziekteverwekkers*. In vitro is een zeer snelle en vrijwel volledige afgifte van polyhexanide (PHMB) uit het wondverband na 24 uur aangetoond. Afhankelijk van de wondtoestand kunnen de producten vocht aan de wond afgeven of overtollig exsudaat opnemen. Daarmee wordt een vochtig wondmilieu gecreëerd. De verbandwissel verloopt atraumatisch. Het materiaal is eenvoudig aan te passen aan de vorm en diepte van de betreffende wond. Daarom zijn deze

producten ook zeer geschikt voor moeilijk te verzorgen lichaamsdelen. De positieve eigenschappen van het wondverband verhinderen vastkleven aan de wond of aan het secundaire verband. Het vochtige milieu en het verkoelende effect worden door de patiënt als aangenaam en pijnverlichtend ervaren.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor het spectrum van in vitro aangetoonde ziekteverwekkers

Beoogd doel

- Suprasorb X + PHMB dient voor wondgenezing of voor verkleining van het oppervlak van wonden met infectiegevaar of met een infectie:
 - ◆ zwak tot matig exsuderende wonden
 - ◆ oppervlakkige of diepe wonden
- Indicaties
 - ◆ arteriële en veneuze ulcers
 - ◆ diabetische ulcers
 - ◆ decubitus
 - ◆ oppervlakkige, tweedegraads brandwonden
 - ◆ postoperatieve wonden
 - ◆ huidtransplantaten
 - ◆ split-skin donor sites
 - ◆ schaafwonden, laceraties


Eigenschappen

- afhankelijk van de wondtoestand kan vocht aan de wond worden afgegeven of overtollig exsudaat worden opgenomen
- er wordt een vochtig wondmilieu tot stand gebracht
- atraumatische verbandwissel
- eenvoudige aanpassing aan de vorm en diepte van de betreffende wond
- zeer geschikt voor moeilijk te verzorgen lichaamsdelen
- het vochtige milieu en het verkoelende effect worden door de patiënt als aangenaam en pijnverlichtend ervaren
- Antimicrobieel actief tegen een breed spectrum van ziekteverwekkers*

*Zie de gebruiksaanwijzing voor het spectrum van in vitro aangetoonde ziekteverwekkers

Suprasorb® X + PHMB

Regelt de vochtigheid in de wond en reduceert ziektekiemen

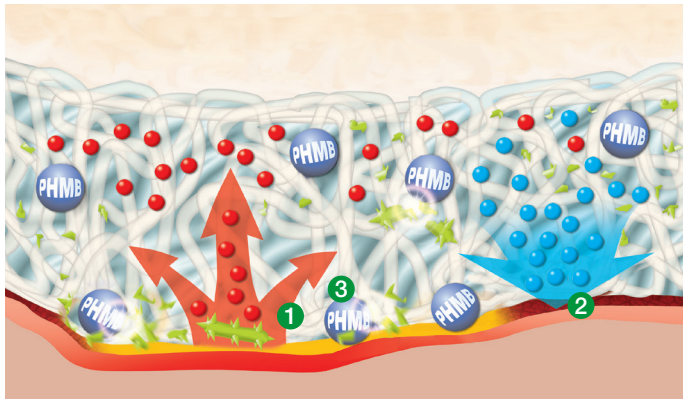

Werking

- 1 overtollig exsudaat uit de wond wordt in het verband opgenomen
- 2 vocht uit het verband wordt aan de licht exsuderende wond afgegeven
- 3 micro-organismen worden gedood door vrijkomend polyhexamethyleenbiguanide (PHMB)

Opmerkingen

- gebruik geschikt secundair verband
- Wend u bij optreden van de volgende symptomen tot een arts of verpleegkundige:
 - ◆ kleurverandering van de wond en/of wondgeur
 - ◆ stagnerende wondgenezing
 - ◆ klinische tekenen van een infectie
- Bij bekende overgevoeligheid of allergie tegen een of meer bestanddelen mag het product niet worden gebruikt.
- Bij de behandeling van geïnfecteerde wonden moet het wondverband niet als enige therapie gebruikt worden, maar dient het op basis van het oordeel van de behandelend arts te worden aangevuld met een medicamenteuze therapie volgens lokale klinische protocollen.

Interval tussen verbandwisselingen

De intervallen tussen wisselingen van Supra-sorb X + PHMB worden afhankelijk van de wondsituatie door de behandelend arts bepaald.

Productsamenstelling

- Water
- Cellulose
- 0,3% Polyhexamethyleenbiguanide (PHMB/polyhexanide)

Suprasorb® X + PHMB

Afmetingen (cm)	REF	Z-Indexnummer	VE (stuks)
kompres			
5 x 5	20 540	151 833 94	5 / 90
9 x 9	20 541	151 834 08	5 / 80
14 x 20	20 542	151 834 16	5 / 65
Tamponade			
2 x 21	20 543	151 833 86	5 / 130